

I-TECH
MEDICAL DIVISION

**La nostra mission,
la tua libertà:
- dolore
+ riabilitazione**




IACER, l'azienda.

Da oltre **30 anni** progettiamo e produciamo **dispositivi medici certificati** e facili da usare in autonomia.

Con il brand I-Tech Medical Division **le nostre soluzioni arrivano a casa dei pazienti, migliorando, giorno dopo giorno, la qualità della loro vita.**

Insieme al tuo punto vendita di fiducia **ti accompagniamo durante tutto il tuo percorso terapeutico**, fino alla risoluzione del problema.

IL TUO RIVENDITORE DI FIDUCIA



Terapia accessibile, con noi è realtà.

**Più di 1.000.000
di pazienti
serviti in Europa**



**2000 rivenditori
in tutta Italia**



**Customer Care
tradizionale e 24/7 digitale**



**Servizi di salute in cloud
grazie alle nostre App**

19%

**Detrazione fiscale
su tutti i dispositivi medici**



**Garanzia estesa e
servizi esclusivi con
la registrazione del dispositivo**

**Ti guidiamo nella scelta
della giusta soluzione.**

Hai una patologia
cronica o acuta?



Hai già parlato con
il tuo medico?

Non sai ancora
cosa fare?



Affidati a noi.

Partiamo da qui



Scansiona il Qrcode, trova la tua patologia e
ti proponiamo il trattamento più adatto.

Fai correttamente terapia a casa grazie a servizi unici e gratuiti

CANALI TRADIZIONALI



Assistenza telefonica
0415401356



Assistenza via e-mail:
customercare@iacer.it

CANALI DIGITALI



App **I-Tech Life**



Portale MyGRS
www.mygrs.it



Hera
l'assistente virtuale 24/7


I-TECH *Life*

La tua salute in un click.

**Collega il tuo dispositivo,
imposta il tuo piano terapeutico
e monitora i progressi
in tempo reale.**



- ✓ **Agenda terapeutica sempre con te**
pianifica e gestisci la tua terapia
in modo semplice
- ✓ **Monitora i tuoi parametri**
registra e consulta i dati in tempo reale
- ✓ **Segui i tuoi progressi**
grafici chiari per tenere sotto controllo
la terapia
- ✓ **Scarica e condividi i tuoi dati**
aggiorna il tuo medico o caregiver
sulla tua terapia
- ✓ **Contenuti personalizzati**
suggerimenti mirati in base alle tue necessità
- ✓ **Supporto diretto**
assistenza dal team I-Tech Medical Division

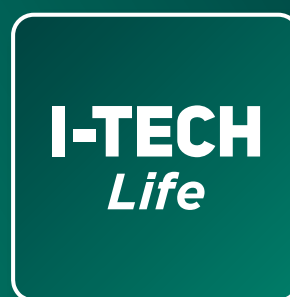

Scarica la nostra app





**6 MESI
DI GARANZIA EXTRA:
il nostro modo per dirti grazie.**

- 1 Convalida la garanzia del tuo dispositivo**
- 2 Raccontaci com'è andata dopo 45 giorni di utilizzo**

**In pochi semplici passaggi otterrai
6 mesi di garanzia extra, GRATIS!**



Cosa ti offriamo di veramente unico?



Customer Care dedicato

con possibilità di appuntamento con un nostro operatore



App I-Tech Life

con calendario terapeutico e condivisione dei dati di terapia



Dispositivi medici principali con Bluetooth integrato

Scegli la soluzione più adatta a te e scopri i nostri dispositivi medici



Diagnostica

44

Detrai il tuo dispositivo

46

Per il professionista

47

MAGNETOTERAPIA / CEMP

Riduci dolore e infiammazioni con la magnetoterapia. L'alleato ideale per trattare patologie di tipo traumatico e cronico che colpiscono ossa, muscoli e articolazioni.

L'azione dei campi elettromagnetici pulsati aiuterà le cellule del tuo corpo a ripristinare il loro equilibrio e corretto funzionamento.

DURATA DEL TRATTAMENTO CONSIGLIATA



Almeno 2-4 ore al giorno, in base alla patologia.



45-90 giorni. Eventualmente ripetibile.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

PATOLOGIE INFIAMMATORIE - OSTEOPOROSI - ARTROSI - ARTRITE -
INFIAMMAZIONI - EDEMA OSSEO - FRATTURE - LOMBALGIA - ALGODISTROFIA -
DOLORI ARTICOLARI - ULCERE - NEUROPATIE

LAMAGNETO

Riduci dolore e infiammazioni comodamente a casa tua.

INTENSITÀ FINO A 150 GAUSS
per ciascuno dei 2 canali



FREQUENZA DA 1 A 100 HZ



I-TECH
Life

Collegabile all'APP



Raccomandata dai medici.

2 TRATTAMENTI PER SEDUTA
e ottieni più risultati in meno tempo

46 PROGRAMMI PREIMPOSTATI
per rendere semplicissima la tua terapia

CE 1936

MD Dispositivo medico



Incluso nella dotazione



Aggiungi Osteomat!

Il materassino per trattamenti di lunga durata su tutto il corpo.
Scopriilo a pagina 16



PROGRAMMI

01 Osteoporosi	13 Dolore lombo-sacrale	25 Tendinite	37 Sindrome da impingement
02 Artrosi	14 Artrosi spalla	26 Condropatia	38 Sindrome del tunnel carpale
03 Artrite	15 Artrosi ginocchio	27 Antinfiammatorio	39 Protesi titanio
04 Artrosi cervicale	16 Periartrite scapolo omerale	28 Colpo di frusta	40 Cuffia dei rotatori
05 Dolori articolari	17 Coxartrosi	29 Cicatrizzazione	41 Tunnel tarsale
06 Cervicalgia	18 Atrofie muscolari	30 Ulcere cutanee	42 Notturmo 1 Hz
07 Dolore cronico	19 Trattamento muscolare	31 Discopatia	43 Notturmo 15 Hz
08 Fratture	20 Osteonecrosi	32 Mialgia	44 Notturmo 50 Hz
09 Epicondilite	21 Algodistrofia	33 Neuropatia	45 Notturmo 75 Hz
10 Epitrocileite	22 Lesione cartilaginea	34 Strappo muscolare	46 Scansione automatica (Autoscan)
11 Pseudoartrosi	23 Lesione legamento	35 Crampo muscolare	
12 Lombalgia	24 Edema osseo	36 Rizartriosi	



LAMAGNETO PRO

Ancora più semplice, ancora più sicura. Blocca il programma con la password e avvia sempre la terapia corretta.

63 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

per rendere semplicissima la tua terapia

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI

grazie alle 10 memorie libere

2 TRATTAMENTI PER SEDUTA

e ottieni più risultati in meno tempo

BLOCCA CON PASSWORD

e sei sicuro di non variare i parametri di terapia corretti



TRACCIA LE TERAPIE ESEGUITE

con il contatore integrato

INTENSITÀ FINO A 200 GAUSS

per ciascuno dei 2 canali

FREQUENZA DA 1 A 120 HZ

per impostare proprio i parametri prescritti dal tuo medico



MD Dispositivo medico



Collegabile all'APP




Raccomandata dai medici.

Incluso nella dotazione



PROGRAMMI (LAMAGNETO PRO E LAMAGNETO X)

01 Osteoporosi	09 Epicondilite	17 Coxartrosi	25 Tendinite
02 Artrosi	10 Epitrocleite	18 Atrofie muscolari	26 Condropatia
03 Artrite	11 Pseudoartrosi	19 Trattamento muscolare	27 Antinfiammatorio
04 Artrosi cervicale	12 Lombalgia	20 Osteonecrosi	28 Colpo di frusta
05 Dolori articolari	13 Dolore lombo-sacrale	21 Algodistrofia	29 Cicatrizzazione
06 Cervicalgia	14 Artrosi spalla	22 Lesione cartilaginea	30 Ulcere cutanee
07 Dolore cronico	15 Artrosi ginocchio	23 Lesione legamento	31 Discopatia
08 Fratture	16 Periartrite scapolo omerale	24 Edema osseo	32 Mialgia

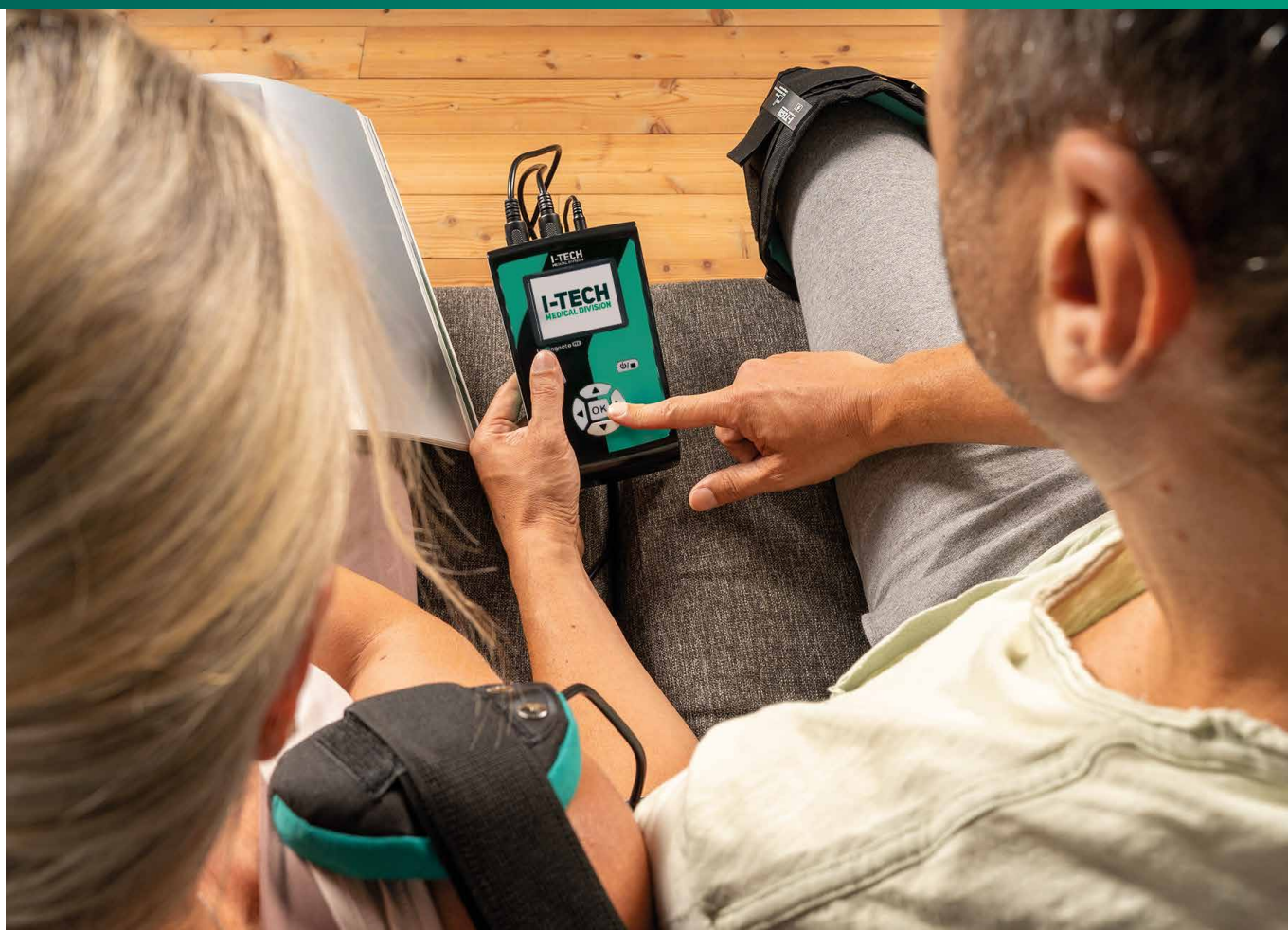

Passa a
LAMAGNETO X

Le caratteristiche de LaMagneto Pro
più il materassino Osteomat.
Per fare terapia su tutto il corpo, anche di notte.



MD Dispositivo medico



33 Neuropatia	41 Tunnel tarsale	49 Trattamento 5 Hz	57 Trattamento 50 Hz
34 Strappo muscolare	42 Notturmo 1 Hz	50 Trattamento 8 Hz	58 Trattamento 60 Hz
35 Crampo muscolare	43 Notturmo 15 Hz	51 Trattamento 10 Hz	59 Trattamento 70 Hz
36 Rizartriosi	44 Notturmo 50 Hz	52 Trattamento 15 Hz	60 Trattamento 75 Hz
37 Sindrome da impingement	45 Notturmo 75 Hz	53 Trattamento 16 Hz	61 Trattamento 80 Hz
38 Sindrome del tunnel carpale	46 Scansione automatica (Autoscan)	54 Trattamento 20 Hz	62 Trattamento 90 Hz
39 Protesi titanio	47 Trattamento 1 Hz	55 Trattamento 30 Hz	63 Trattamento 100 Hz
40 Cuffia dei rotatori	48 Trattamento 4 Hz	56 Trattamento 40 Hz	



MAG700

Il dispositivo a 1 canale per trattare le principali patologie osteoarticolari.



CE 0068

11 programmi
-
1 canale
Intensità fino a 70 gauss
Frequenza da 5 a 100 Hz

Incluso nella dotazione



F2S700

PROGRAMMI (MAG700)

01 Osteoartrosi	07 Antinfiammatorio
02 Artrite	08 Scansione automatica (Autoscan)
03 Osteoporosi	09 Trattamento 5 Hz
04 Fratture	10 Trattamento 10 Hz
05 Dolori articolari	11 Trattamento 20 Hz
06 Dolori muscolari	

MAG2000

Da 15 anni, il dispositivo più venduto al mondo. Per te, nella sua versione originale.



CE 0068

35 programmi terapeutici preimpostati
-
2 canali
Intensità fino a 150 gauss per canale
Frequenza da 1 a 100 Hz

Incluso nella dotazione



F3S2000

PROGRAMMI (MAG2000 - MAG2000 PREMIUM - MAG2000 PLUS)

01 Osteoporosi	07 Distorsioni
02 Artrosi	08 Fratture
03 Artrite	09 Epicondilitis
04 Artrosi cervicale	10 Epitrocleite
05 Dolori articolari	11 Contusioni intercostali
06 Cervicalgia	12 Lombalgia

MAG2000 PREMIUM

Due fasce già incluse. Per trattare la tua patologia su più parti del corpo.



35 programmi terapeutici preimpostati

-

2 canali

Intensità fino a 150 gauss per canale

Frequenza da 1 a 100 Hz

Incluso nella dotazione



F3S2000

MAG2000 PLUS

Indossi il gesso? Mag2000 Plus è ideale anche per trattamenti ad altà intensità.



35 programmi terapeutici preimpostati

+ 10 memorie libere personalizzabili

2 canali

Intensità fino a 200 gauss per canale

Frequenza da 1 a 120 Hz

Incluso nella dotazione



F3S2000

CV2S2000

13 Dolore lombo-sacrale	19 Contratture muscolari	25 Trattamento 15 Hz	31 Trattamento 70 Hz
14 Artrosi spalla	20 Osteonecrosi	26 Trattamento 20 Hz	32 Trattamento 80 Hz
15 Artrosi ginocchio	21 Trattamento 1 Hz	27 Trattamento 30 Hz	33 Trattamento 90 Hz
16 Periartrite scapolo omerale	22 Trattamento 3 Hz	28 Trattamento 40 Hz	34 Trattamento 100 Hz
17 Coxartrosi	23 Trattamento 5 Hz	29 Trattamento 50 Hz	35 Scansione automatica (Autoscan)
18 Atrofie muscolari	24 Trattamento 10 Hz	30 Trattamento 60 Hz	

PERSONALIZZA LA TUA TERAPIA

Completa il tuo dispositivo con gli accessori adatti alle tue esigenze.

Dolore diffuso?

OSTEOMAT

Soffice, leggero, ripiegabile. Il materassino per trattamenti di lunga durata, su tutto il corpo. Anche mentre dormi.

Compatibile con LaMagneto, LaMagneto Pro, LaMagneto X, Mag2000, Mag2000 Premium, Mag2000 Plus

TRATTA TUTTO IL CORPO

grazie agli 8 solenoidi posizionati all'altezza di spalle, colonna vertebrale, bacino e ginocchia

ESTREMAMENTE SOFFICE

per fare terapia di notte, mentre dormi

LEGGERO E RIPIEGABILE

per trasportarlo dove preferisci



MD Dispositivo medico



Raccomandato dai medici.

COPPIA DI SOLENOIDI CV2S2000

Coppia di solenoidi professionali per terapia ad alta intensità (diametro solenoidi: 11 cm)

Compatibile con LaMagneto, LaMagneto Pro, LaMagneto X, Mag2000, Mag2000 Premium, Mag2000 Plus



CE MD

FASCIA TERAPEUTICA F3S2000

Fascia elastica terapeutica per magnetoterapia a bassa frequenza con cavo a 3 solenoidi.

Compatibile con LaMagneto, LaMagneto Pro, LaMagneto X, Mag2000, Mag2000 Premium, Mag2000 Plus.



CE MD

FASCIA TERAPEUTICA F2S700

Fascia elastica terapeutica per magnetoterapia a bassa frequenza con cavo a 2 solenoidi.

Compatibile con Mag700.



CE MD

TAP2000

Il tappetino 40x40cm a 6 solenoidi, ideale per i tuoi trattamenti alla schiena.

Compatibile con con LaMagneto, LaMagneto Pro, LaMagneto X, Mag2000, Mag2000 Premium, Mag2000 Plus.



CE MD

CIL-MAG

Il solenoide cilindrico professionale che ti permette di trattare comodamente gli arti inferiori.

Compatibile con Mag2000, Mag2000 Premium, Mag2000 Plus.



CE MD

ORTHOMAG

Sei sempre in movimento?
Con Orthomag fai terapia ovunque vuoi, in totale libertà.

PORTATILE A BATTERIA

per fare terapia dove vuoi,
quando vuoi



**INTENSITÀ
FINO A 25 GAUSS**

APPLICATORE FLESSIBILE



CE 0197

Incluso nella dotazione



TRATTAMENTI

PROGRAMMA L (50 HZ)

- Algodistrofie
- Gonartrosi
- Degenerazione cartilaginea
- Fratture
- Lesione cartilaginea
- Osteoartrosi
- Osteonecrosi
- Osteoporosi
- Ritardi di calcificazione
- Pseudoartrosi

PROGRAMMA H (75 HZ)

Aderenze cicatriziali	Epicondilite
Artrite	Epitrocleite
Artrosi	Ernia del disco
Borsite	Fascite plantare
Brachialgia	Lombalgia
Capsulite	Meniscopatia
Cervicalgia	Metatarsalgia
Colpo di frusta	Periartrite
Condropatia	Pubalgia
Contusioni	Reumatismi
Coxartrosi	Rizartrosi
Dolori articolari in genere	Sciatalgia
Dolori reumatici	Stati infiammatori in genere
Dorsalgia	Strappi muscolari

MAG1000

Il dispositivo per magnetoterapia ad alta frequenza per trattare prevalentemente patologie muscolari o tendinee.

20 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

per rendere semplicissima la tua terapia

PORTATILE A BATTERIA

per fare terapia dove vuoi, quando vuoi

FREQUENZA 27 MHz

MODULAZIONE DA 8 A 640 Hz

2 CANALI

3 LIVELLI DI INTENSITÀ

regolabili



Incluso nella dotazione



FT11000-2018

Aggiungi TAP-HF!

Il tappetino 40x40cm per magnetoterapia ad alta frequenza.



MD Dispositivo medico

Le foto degli accessori sono puramente illustrative, il prodotto potrebbe riportare delle variazioni in alcuni dettagli estetici.

PROGRAMMI

01 Artrite / Artrosi	06 Osteoporosi	11 Contusioni	16 Epitrocleite
02 Reumatismi	07 Fratture	12 Mialgie	17 Lombalgia
03 Dolori / Protesi articolari	08 Distorsioni	13 Tendiniti	18 Contratture muscolari
04 Ernia discale	09 Lussazioni	14 Ematomi	19 Applicazione media 2h
05 Dolori muscolari	10 Traumi	15 Epicondilite	20 Applicazione lunga 4h



Abbiamo pensato anche ai nostri amici animali

KORA

a IACER brand

KORA PET

Kora Pet, il dispositivo per cani e gatti ideale per trattare:

- ▶ artriti/artrosi ▶ discopatie ▶ neuropatie ▶ lesioni tendinee
- ▶ lesioni a legamenti ▶ displasie dell'anca ▶ fratture
- ▶ osteointegrazione con protesi ▶ ulcere ▶ atrofie muscolari
- ▶ recupero post-intervento

**INTENSITÀ FINO
A 100 GAUSS**

per ciascuno dei 2 canali

**FREQUENZA
DA 1 A 75 HZ**



**18 PROGRAMMI
PREIMPOSTATI**

per rendere
semplicissima
la tua terapia

DOTAZIONE:



KORA P R I X

È il dispositivo specifico per trattare la **schiena del cavallo**.
Ideale per:

- contratture e strappi muscolari ➤ sciatalgia
- ossificazione dei processi spinosi ➤ lombalgia
- dolore a livello di illeopsoas ➤ fiaccature

**INTENSITÀ FINO
A 100 GAUSS**
per ciascuno dei 2 canali

**FREQUENZA
DA 1 A 75 HZ**



**18 PROGRAMMI
PREIMPOSTATI**

per rendere
semplicissima
la tua terapia

DOTAZIONE:



KORA O X E R

È il modo più semplice e veloce per trattare
le **gambe del cavallo**. Perfetto per trattare le patologie del:

- tendine flessore superficiale e profondo ➤ legamento
sospensore e collaterale ➤ branche ➤ briglie
- banda coronaria ➤ carpo ➤ nodello ➤ atrofia ATM
- cervicalgia ➤ trigger points

**PORTATILE,
CON BATTERIA
RICARICABILE**
per dare libertà
di movimento
al cavallo



**INTENSITÀ
FINO A 25
GAUSS**

DOTAZIONE:



PRESSOTERAPIA

Gambe gonfie o pesanti?

La pressoterapia ti aiuterà a ridurre il gonfiore, la rigidità degli arti e a rimuovere le tossine.

Promuove, inoltre, il corretto ritorno venoso e linfatico di braccia e gambe.

DURATA DEL TRATTAMENTO CONSIGLIATA



Da 20 a 60
minuti al giorno



30 giorni

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

EDEMA - LINFEDEMA - ULCERE VENOSE - INSUFFICIENZA VENOSA -
RECUPERO MUSCOLARE

COME FUNZIONA?

La pressoterapia esercita una compressione sequenziale su arti e addome con un movimento disto-proximale, cioè dalla periferia verso il centro del corpo. Questa azione favorisce la movimentazione del sangue e della linfa in presenza di ristagni o difficoltà di circolazione.

I-PRESS

I-Press ti aiuta a migliorare la circolazione venosa e linfatica degli arti e a trattare alcune patologie dell'apparato circolatorio.

4 CAMERE DI COMPRESSIONE

che si gonfiano in sequenza
distale prossimale

SCEGLI CONFIGURAZIONE E ACCESSORI

personalizza il trattamento come desideri

NUOVO COMPRESSORE PIÙ SILENZIOSO

FACILE E INTUITIVA

imposta durata della seduta e pressione e sei già pronto per la terapia



Studi clinici propri su edema e recupero post-artroprotesi



Collegabile all'APP



Raccomandata dai medici.



MD Dispositivo medico

CONFIGURAZIONI

I-PRESS LEG1

- corpo macchina
- n.1 gambale
- n.1 tubo 4 camere a 4 terminazioni
- n.1 connettore
- n.1 plantare pressorio



I-PRESS LEG2

- corpo macchina
- n.2 gambali
- n.2 tubi 4 camere a 4 terminazioni
- n.1 sdoppiatore
- n.1 connettore
- n.2 plantari pressori



I-PRESS ARMI

- corpo macchina
- n.1 bracciale
- n.1 tubo 4 camere a 4 terminazioni
- n.1 connettore



Tutte e 3 le configurazioni sono disponibili nelle taglie M e L e possono essere personalizzate ulteriormente con tutta la gamma di accessori per la pressoterapia.

TRATTAMENTI

Pressione (mmHg)

Tempo (minuti)

	Pressione (mmHg)	Tempo (minuti)
Edema	50	50
Linfedema	50	30
Ulcere venose	50	60
Insufficienza venosa	50	60
Recupero muscolare	85	20

GAMBALI

Gambali a 4 camere

GAMBALE

CIRCONFERENZA COSCIA

CIRCONFERENZA CAVIGLIA

LUNGHEZZA GAMBA

(misura presa dall'interno coscia al tallone)

ESTENSORI

Estensori per gambali

TAGLIA (M)




Fino a 64 cm

Fino a 50 cm

Fino a 82 cm



TAGLIA (L)

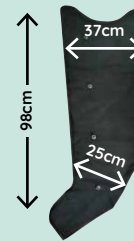

Fino a 70 cm

Fino a 50 cm

Fino a 98 cm

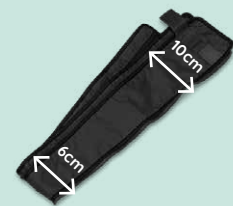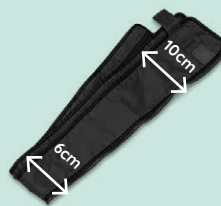

PROTEZIONI IN TNT

Coppia di protezioni igieniche in TNT per gambali



PLANTARI PRESSORI



BRACCIALE

Bracciale a 4 camere

BRACCIALE

CIRCONFERENZA ASCELLA

CIRCONFERENZA POLSO

TAGLIA (M)



Fino a 47 cm

Fino a 32 cm

TAGLIA (L)



Fino a 56 cm

Fino a 40 cm

TUBO 4 CAMERE A 4 TERMINAZIONI

Idoneo per gambale e bracciale



CONNETTORE

Connettore a 4 tubi per bracciale e gambale.



SDOPPIATORE PER DOPPIA TERAPIA

Adattatore per terapia simultanea.
(2 gambali e bracciale)



Le foto degli accessori sono puramente illustrative, il prodotto potrebbe riportare delle variazioni in alcuni dettagli estetici.

Per maggiori dettagli
sugli accessori
della pressoterapia,
scansiona il QR Code

<https://itechmedicaldivision.com/famiglie/accessori-pressoterapia/>



per me che

RECUPERO LA FORMA



- Gambe più **leggere**
- **Meno** gonfiore
- Segni **ridotti o assenti**
- Sensazione generale di **sollievo**

WEPERE
a IACER brand

VIGGO, la pressoterapia che rimette in forma le tue gambe. **Riparti da te.**

- ✓ Favorisce la **circolazione sanguigna**
- ✓ Rilassa la **muscolatura**
- ✓ Riduce **gonfiore e dolore**
- ✓ Drena **liquidi e tossine**
- ✓ Ottimizza il **recupero post attività fisica**

VIGGO

Il dispositivo di pressoterapia ad uso **estetico e sportivo**.
Compatto, leggero e senza fili, ti segue ovunque grazie alla sua batteria a lunga durata.



4 CAMERE DI COMPRESSIONE

che si gonfiano in sequenza

TAGLIE

Taglia S/M:

lunghezza (coscia-tallone) 84 cm
circonferenza massima coscia 72 cm
circonferenza massima piede 35,5 cm.

Taglia L/XL:

lunghezza (coscia-tallone) 92 cm
circonferenza massima coscia 80 cm
circonferenza massima piede 38 cm.



ELETTROTERAPIA

Recupera più velocemente, riducendo il dolore. L'elettroterapia trasmette micro-impulsi al corpo umano, diversi in frequenza, larghezza di impulso e intensità, a seconda del trattamento da effettuare.

DURATA DEL TRATTAMENTO CONSIGLIATA



Per conoscere la durata della terapia, ti consigliamo di consultare il tuo medico e di attenerti alle indicazioni presenti nel nostro manuale d'uso.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

RECUPERO MUSCOLARE – RIDUZIONE DEL DOLORE – IONOFRESI –
TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA – TRATTAMENTO DEL MUSCOLO DENERVATO

MIO-CARE TENS

Riduci il dolore rapidamente.
Sia in caso di dolore cronico, che acuto.

PORTATILE
A BATTERIA



CE 0197

20 programmi TENS

-

-

2 canali indipendenti

Onda quadra bifasica compensata

Clip aggancio cintura

Intensità massima: 100mA

Batteria interna Ni-Mh ricaricabile

MIO-CARE FITNESS

Trova sollievo dal dolore, riduci gli inestetismi e
rafforza i tuoi muscoli. Tutto con Mio-Care Fitness.

PORTATILE
A BATTERIA



CE 0197

20 programmi TENS

20 programmi FITNESS

15 programmi BEAUTY

2 canali indipendenti


Onda quadra bifasica compensata

Clip aggancio cintura


Intensità massima: 100mA

Batteria interna Ni-Mh ricaricabile

Incluso nella dotazione

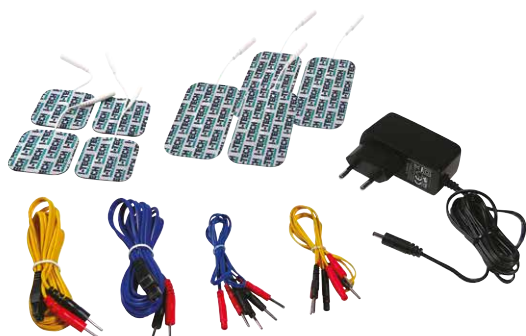

Incluso nella dotazione

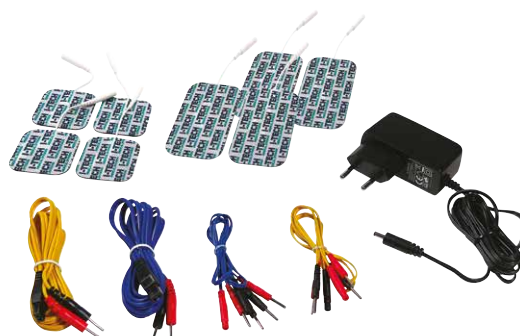

PROGRAMMI

TENS

(MIO-CARE TENS E MIO-CARE FITNESS)

01	Tens convenzionale (rapido)
02	Tens endorfinico (ritardato)
03	Tens ai valori massimi
04	Antinfiammatorio
05	Cervicalgia / Cefalea miotensiva
06	Lombalgia / Sciatalgia
07	Distorsioni / Contusioni
08	Vascolarizzazione
09	Rilassamento muscolare
10	Ematomi
11	Prevenzione atrofia
12	Atrofia (recupero trofismo)
13	Dolori mano e polso
14	Stimolazione plantare
15	Epicondilite
16	Epitrocleite
17	Periartrite
18	Microcorrente
19	Incontinenza da sforzo*
20	Incontinenza da urgenza*

*Sonde non incluse

FITNESS

(MIO-CARE FITNESS)

01	Riscaldamento
02	Resistenza arti superiori e tronco
03	Resistenza arti inferiori
04	Forza resistente arti superiori e tronco
05	Forza resistente arti inferiori
06	Forza base arti superiori e tronco
07	Forza base arti inferiori
08	Forza veloce arti superiori e tronco
09	Forza veloce arti inferiori
10	Forza esplosiva arti superiori e tronco
11	Forza esplosiva arti inferiori
12	Capillarizzazione profonda
13	Recupero muscolare
14	Agonista-antagonista
15	Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco
16	Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori
17	Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco
18	Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori
19	Decontratturante
20	Massaggio profondo

BEAUTY

(MIO-CARE FITNESS)

01	Rassodamento arti superiori e tronco
02	Rassodamento arti inferiori
03	Tonificazione arti superiori e tronco
04	Tonificazione arti inferiori
05	Definizione arti superiori e tronco
06	Definizioni arti inferiori
07	Modellamento
08	Microlifting
09	Lipolisi addome
10	Lipolisi cosce
11	Lipolisi glutei e fianchi
12	Lipolisi braccia
13	Elasticità tessuti
14	Capillarizzazione
15	Pesantezza alle gambe

Vuoi il top?

Passa a I-TECH PHYSIO

L'elettrostimolatore facile da usare e completamente programmabile per la terapia del dolore e la riabilitazione muscolare.

Scopriilo a pagina 34



MIO-CARE PRO

Rafforza i tuoi muscoli, dopo un intervento o per prepararti alle gare.

2 CANALI INDIPENDENTI

facilmente programmabili

2 TIPI DI ONDA QUADRA

bifasica compensata e monofasica

CLIP DI AGGANCIO ALLA CINTURA


per una maggiore comodità

INTENSITÀ MASSIMA 100 mA

PORTATILE A BATTERIA



Incluso nella dotazione

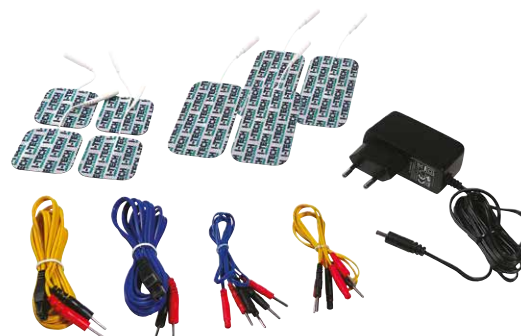



PROGRAMMI

TENS

- 01 Tens rapido
- 02 Tens endorfinico
- 03 Tens ai valori massimi
- 04 Antinfiammatorio
- 05 Cervicalgia / Cefalea miotensiva
- 06 Lombalgia / Sciatalgia
- 07 Distorsioni / Contusioni
- 08 Vascolarizzazione
- 09 Rilassamento muscolare o Decontratturante
- 10 Dolori mano e polso
- 11 Stimolazione plantare
- 12 Epicondilite
- 13 Epitrocleite
- 14 Periartrite

NEMS

- 01 Riscaldamento
- 02 Resistenza arti superiori e tronco
- 03 Resistenza arti inferiori
- 04 Forza resistente arti superiori e tronco
- 05 Forza resistente arti inferiori
- 06 Forza base arti superiori e tronco
- 07 Forza base arti inferiori
- 08 Forza veloce arti superiori e tronco
- 09 Forza veloce arti inferiori
- 10 Forza esplosiva arti superiori e tronco
- 11 Forza esplosiva arti inferiori
- 12 Capillarizzazione profonda
- 13 Recupero muscolare
- 14 Agonista-antagonista
- 15 Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco
- 16 Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori
- 17 Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco
- 18 Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori
- 19 Decontratturante
- 20 Massaggio profondo
- 21 EMS

BEAUTY

- 01 Rassodamento arti superiori e tronco
- 02 Rassodamento arti inferiori
- 03 Tonificazione arti superiori e tronco
- 04 Tonificazione arti inferiori
- 05 Definizione arti superiori e tronco
- 06 Definizioni arti inferiori
- 07 Modellamento
- 08 Microlifting
- 09 Lipolisi addome
- 10 Lipolisi cosce
- 11 Lipolisi glutei e fianchi
- 12 Lipolisi braccia
- 13 Elasticità tessuti
- 14 Capillarizzazione
- 15 Pesantezza alle gambe

MEMORIE LIBERE

- 01 TENS Mem1
- 02 TENS Mem2
- 03 TENS Mem3
- 04 TENS Mem4
- 05 TENS Mem5
- 06 NEMS Mem1
- 07 NEMS Mem2
- 08 NEMS Mem3
- 09 NEMS Mem4
- 10 NEMS Mem5
- 11 NEMS Alternato
- 12 NEMS Alternato
- 13 Test batteria

I-TECH PHYSIO

Il dispositivo completo e programmabile per trattare il dolore e riabilitare i tuoi muscoli.



Raccomandato dai medici.



Studi clinici sulla preabilitazione in attesa di artroprotesi.



PROGRAMMI

TENS

- 01 Tens rapido
- 02 Tens endorfinico
- 03 Tens ai valori massimi
- 04 Antinfiammatorio
- 05 Cervicalgia/Cefalea miotensiva
- 06 Lombalgia/Sciatalgia
- 07 Distorsioni/Contusioni
- 08 Vascolarizzazione
- 09 Decontratturante
- 10 Dolori mano e polso
- 11 Stimolazione plantare
- 12 Epicondilita
- 13 Epitrocleeite
- 14 Periartrite

REHA

- 01 Ionoforesi L
- 02 Ionoforesi M
- 03 Ionoforesi H
- 04 Microcorrente
- 05 Ematoma
- 06 Edema
- 07 Tens modulata
- 08 Tens Burst
- 09 Prevenzione atrofia
- 10 Atrofia
- 11 Denervato quadra 50 ms
- 12 Denervato quadra 100 ms
- 13 Denervato quadra 150 ms
- 14 Denervato quadra 200 ms
- 15 Denervato quadra 250 ms
- 16 Denervato triangolare 50 ms
- 17 Denervato triangolare 100 ms
- 18 Denervato triangolare 150 ms
- 19 Denervato triangolare 200 ms
- 20 Denervato triangolare 250 ms
- 21 Interferenziale
- 22 Tens con modulazione in ampiezza
- 23 Tens alternata
- 24 Tens con modulazione in frequenza 1
- 25 Tens con modulazione in frequenza 2
- 26 Tens con modulazione in ampiezza
- 27 Kotz

**2 CANALI
INDIPENDENTI**

facilmente programmabili

**INCLUDE TRATTAMENTI
PER MUSCOLO
DENERVATO,
IONOFORESI
E INCONTINENZA**

**ONDA
INTERFERENZIALE
E KOTZ**

oltre alle più classiche
quadra bifasica compensata,
quadra monofasica
e triangolare



**I-TECH
Life** Collegabile all'APP

**CLIP DI AGGANCIAMENTO
ALLA CINTURA**

per una maggiore
comodità

**INTENSITÀ
MASSIMA 100 mA**

**PORTATILE
A BATTERIA**



Incluso nella dotazione



Possibilità di aggiunt

Sonda anale
Sonda vaginale



NEMS

- | | |
|---|---|
| 01 Riscaldamento | 16 Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori |
| 02 Resistenza arti superiori e tronco | 17 Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco |
| 03 Resistenza arti inferiori | 18 Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori |
| 04 Forza resistente arti superiori e tronco | 19 Decontratturante |
| 05 Forza resistente arti inferiori | 20 Massaggio profondo |
| 06 Forza base arti superiori e tronco | 21 EMS |
| 07 Forza base arti inferiori | |
| 08 Forza veloce arti superiori e tronco | |
| 09 Forza veloce arti inferiori | |
| 10 Forza esplosiva arti superiori e tronco | |
| 11 Forza esplosiva arti inferiori | |
| 12 Capillarizzazione profonda | |
| 13 Recupero muscolare | |
| 14 Agonista-antagonista | |
| 15 Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco | |

BEAUTY

- | |
|---|
| 01 Rassodamento arti superiori e tronco |
| 02 Rassodamento arti inferiori |
| 03 Tonificazione arti superiori e tronco |
| 04 Tonificazione arti inferiori |
| 05 Definizione arti superiori e tronco |
| 06 Definizioni arti inferiori |
| 07 Modellamento |
| 08 Microlifting |
| 09 Lipolisi addome |
| 10 Lipolisi cosce |
| 11 Lipolisi glutei e fianchi |
| 12 Lipolisi braccia |
| 13 Elasticità tessuti |
| 14 Capillarizzazione |
| 15 Pesantezza alle gambe |

INCONTINENZA

- | |
|------------------------------------|
| 01 Incontinenza da stress* |
| 02 Incontinenza da stress* |
| 03 Incontinenza da stress* |
| 04 Incontinenza da urgenza* |
| 05 Incontinenza da urgenza* |
| 06 Incontinenza da urgenza* |
| 07 Incontinenza mista* |
| 08 Incontinenza mista* |
| 09 Incontinenza mista* |

*Sonde non incluse

+ 13 MEMORIE LIBERE

T-ONE COACH

Tonifica e rafforza i tuoi muscoli, trova sollievo dal dolore e recupera da traumi e infortuni.

PORTATILE
A BATTERIA



I-TECH
Life

Collegabile all'APP

CE 0068

-
16 programmi TENS
14 programmi NEMS
18 programmi BEAUTY
-
10 programmi doppio utente (2+2)
-
-
4 canali indipendenti (fino a 8 elettrodi)
Intensità regolabile da 1 a 120 mA
Frequenza onda da 1 a 150 Hz
Larghezza impulso da 20 a 300 µs
Tempo preimpostato per ciascun programma
Onda quadra bifasica compensata
-
-
-
-

T-ONE MEDI SPORT

Migliora le tue performance: prima e dopo gli allenamenti, o per recuperare da un infortunio.

PORTATILE
A BATTERIA



I-TECH
Life

Collegabile all'APP

CE 0068

10 programmi REHA
16 programmi TENS
20 programmi NEMS
18 programmi BEAUTY
-
22 programmi doppio utente (2+2)
12 memorie libere TENS/NEMS
Include trattamenti di ionofresi
4 canali indipendenti (fino a 8 elettrodi)
Intensità regolabile da 1 a 120 mA
Frequenza onda da 1 a 1200 Hz
Larghezza impulso da 20 a 450 µs
Tempo da 1 a 90 minuti
Onda quadra bifasica compensata
Onda monofasica (solo per programmi di ionofresi)
-
-
-

Tutti i modelli T-One dispongono di una batteria interna Ni-Mh ricaricabile.

Incluso nella dotazione



Incluso nella dotazione



T-ONE MEDI PRO

Il supporto ideale per te che sei un atleta professionista o lavori con team sportivi.

Dispositivo usato in studio clinico
in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Tedesca.

PORTATILE
A BATTERIA



I-TECH
Life

Collegabile all'APP

CE 0068

16 programmi REHA
16 programmi TENS
20 programmi NEMS
18 programmi BEAUTY
9 programmi URO
22 programmi doppio utente (2+2)
12 memorie libere TENS/NEMS
Include trattamenti per muscolo denervato e ionoforesi
4 canali indipendenti (fino a 8 elettrodi)
Intensità regolabile da 1 a 120 mA
Frequenza onda da 0,2 a 1200 Hz
Larghezza impulso da 20 µs a 300 ms
Tempo da 1 a 90 minuti
Onda quadra bifasica compensata
Onda monofasica (solo per programmi di ionoforesi)
-
-
-

T-ONE REHAB

Il dispositivo più completo per te che sei uno specialista dello sport e della riabilitazione.

Studi clinici post-artroprotesi e pazienti Covid.
Studio sul trattamento dei pazienti sarcopenici.

PORTATILE
A BATTERIA



I-TECH
Life

Collegabile all'APP



Raccomandato
dai medici.

CE 0068

29 Programmi REHA
16 Programmi TENS
20 Programmi NEMS
18 Programmi BEAUTY
9 Programmi URO
22 Programmi doppio utente (2+2)
12 Memorie libere TENS/NEMS
Include trattamenti per muscolo denervato e ionoforesi
4 canali indipendenti (fino a 8 elettrodi)
Intensità regolabile da 1 a 120 mA
Frequenza onda da 0,2 a 1200 Hz
Larghezza impulso da 20 µs a 300 ms
Tempo da 1 a 90 minuti
Onda quadra bifasica compensata
Onda monofasica (solo per programmi di ionoforesi)
Onda triangolare
Onda interferenziale
Onda di Kotz

Tutti i modelli T-One dispongono di una batteria interna Ni-Mh ricaricabile.

Incluso nella dotazione



Incluso nella dotazione



ELJ41X414 / ELJ48X484 MD

4 elettrodi adesivi
pregellati con attacco
jack 2mm.
Misure: 41x41mm
48x48mm



CE

ELJ40X804 / ELJ50X904 MD

4 elettrodi adesivi
pregellati con attacco
jack 2mm.
Misure: 40x80mm
50x90mm



CE

OVAL03 MD

2 elettrodi adesivi pregellati
130x76 mm
con attacco jack 2mm.



CE

ELJ30R4 MD

4 elettrodi da viso
adesivi pregellati 32mm
con attacco jack 2mm.



CE

ELB46X474 MD

4 elettrodi adesivi pregellati
46x47mm
con attacco a bottone.



CE

ELB53X964 MD

4 elettrodi adesivi pregellati
53x96mm
con attacco a bottone.



CE

ELADCL8F

4 adattatori per cavi con
spina maschio 2mm e
elettrodo/fascia
con attacco a bottone.



CE

**FP235-245
FC250-265** MD

4 fasce elastiche conduttive per cosce
2x65cm + 2x50cm e per polpacci 2x35cm
+ 2x45cm regolabili con attacco a bottone.



CE

F180X60 MD

Fascia elastica 8x60 cm
blu per ionofresi.



CE

ELB60X801 / ELB80X1201 MD

Elettrodo per ionofresi in pelle
di daino con attacco a bottone.
Misure: 60x80mm
80x120mm



CE

ELG60X852/ELG80X1202 MD

2 elettrodi in gomma
con attacco jack 2mm.
Misure: 60x85mm / 80x120mm



CE

Le foto degli accessori sono puramente illustrative, il prodotto potrebbe riportare delle variazioni in alcuni dettagli estetici.

SPX60X852/SPX80X1202 **MD**

2 spugne per elettrodi in gomma con attacco jack 2mm.
Misure: 60x85mm / 80x120mm




IPP-PAD **MD**

Elettrodo per ionoforesi specifico per trattamento IPP (Induratio Penis Plastica).



SA2S/BEAC

Sonda anale
Beac con attacco jack 2mm.

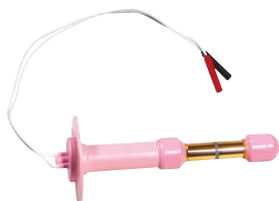

SV2S/BEAC

Sonda vaginale
Beac con attacco jack 2mm.



GE000250 **MD**

Gel 260ml per ultrasuonoterapia e elettroterapia.



HANDY TRODE

Manipolo/Elettrodo bipolare per applicazioni viso/décolté/seno con presa 2mm.



PEN-EL

Penna cerca punti con presa 2mm.



CV025318

Cavo blu e giallo per serie Mio-Care con terminale 2mm.



TWINJ2X2

Cavetti sdoppiatore 2 gialli e 2 blu con terminale 2mm.



MIO-BATTERY NEW

Batteria ricaricabile serie Mio-Care e Mag1000 (2012).



UNICHAR

Carica batteria Mio-Care Tens/Beauty/Fitness e Mag1000 (2012).




UNICHAR NEW

Carica batteria (6,8Vdc) serie T-One, Mag1000 (2018), Mio-Vein, Mio-Care Pro, Mio-Ionotens e I-Tech Physio.



T-ONE BATTERY

Batteria ricaricabile serie T-One 2016, 4,8V Ni-Mh 2300mA. Anche per Mag1000 (2018)

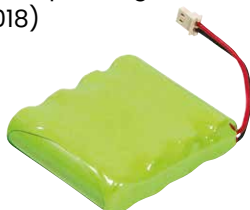

CJ025317 / CJ025314 / CJ025312 / CJ025315

Cavo blu, giallo, rosso, bianco serie T-One con terminale 2mm. Venduti singolarmente.



Le foto degli accessori sono puramente illustrative, il prodotto potrebbe riportare delle variazioni in alcuni dettagli estetici.



ULTRASUONOTERAPIA

Con gli ultrasuoni potrai trovare sollievo dal dolore in poche sedute.

Trasferendo energia ai tessuti del nostro corpo, promuovono la microcircolazione e aiutano a eliminare correttamente i liquidi sottocutanei in eccesso.

DURATA DEL TRATTAMENTO CONSIGLIATA



Da 5 a 15 minuti
al giorno.



10 giorni.
Eventualmente
ripetibile.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

DOLORE MIOFASCIALE - DOLORE MUSCOLARE - TUNNEL CARPALE -
ULCERE VENOSE - ULCERE DA PRESSIONE - DOLORE LOMBARE - ARTROSI -
EPICONDILITE - EPITROCLEITE - TENDINITE - TUNNEL CUBITALE -
STENOSI LOMBARE - SCIATALGIA

POWERSONIC

Sollievo mirato da dolore e infiammazioni muscolo-scheletriche, dove vuoi, quando vuoi.



PORTATILE A BATTERIA

INTENSITÀ MASSIMA 1,6 W/CM²
collegato alla presa di corrente

DURATA E INTENSITÀ REGOLABILI
per 9 diverse combinazioni

ULTRASUONO DA 1 MHZ
come un trattamento professionale ma a casa tua



Collegabile all'APP



Raccomandato dai medici.



TRATTAMENTI

Dolore miofasciale	Ulcere da pressione	Epitrocleite	Sciatalgia
Dolore muscolare	Dolore lombare	Tendinite	
Tunnel carpale	Artrosi	Tunnel cubitale	
Ulcere venose	Epicondilite	Stenosi lombare	

MIO-SONIC

Riduci dolore e contratture, con la compattezza di Mio-Sonic.
Efficace anche nel trattamento di inestetismi.

**FASCIO ULTRASONICO
COLLIMATO**

**INTENSITÀ MASSIMA
1,6 W/CM²**

**DURATA E INTENSITÀ
REGOLABILI**

per 9 diverse combinazioni

**ULTRASUONO
DA 1 MHz**

CE 0197

PROGRAMMI

9 combinazioni di durata e intensità, impostabili per eseguire 20 programmi per trattamenti antalgici e decontratturanti.



DIAGNOSTICA

Monitora i tuoi parametri vitali in un paio di click.

Smartwatch Quadrant

- Display: IPS TFT 1,70"
- Peso: 55 g
- Resistenza all'acqua: IP68
- Durata batteria stand-by: 30 giorni
(uso normale 15 giorni, uso frequente 7 giorni)



Collegabile all'APP



Raccomandato dai medici.

Smartwatch progettato per monitorare vari parametri relativi alla salute e all'attività sportiva. Diversi parametri rilevabili: frequenza cardiaca, ecg, temperatura corporea, SpO2, frequenza respiratoria, sonno, passi, calorie, sport. Oltre ai parametri indicati, include anche cronometro, lettore musicale, foto e meteo.

Bilancia Bluetooth GimaFit

Rileva un'ampia gamma di parametri tra cui: peso, massa grassa, livello di obesità, indice di grasso viscerale, percentuale di acqua nel corpo, massa ossea.

- Portata: 180 Kg – minimo 0,15 Kg
- Display LED: 80x40 mm luce bianca
- Alimentazione: 4 batterie AAA
- Commutabile Kg/lb



Collegabile all'APP



Raccomandata dai medici.

Pulsossimetro OXY-9

Controlla i valori di saturazione dell'ossigeno e frequenza cardiaca dal dito, per misurare l'ossigenazione. Funge anche da pedometro e contacalorie. Applicabile a vari usi in ambienti diversi (istituzione medica, famiglia, centri di fitness).



Collegabile all'APP



Raccomandato dai medici.



Misuratore di pressione bluetooth

Misurazioni rapide e affidabili con rilevamento del battito cardiaco irregolare e funzionalità di calcolo dei valori medi.

- 200 misurazioni con 4 batterie AA
- Ampio schermo retroilluminato
- Uso domestico e professionale



I-TECH
Life

Collegabile all'APP



Raccomandato dai medici.

CE 0123

Termometro a infrarossi bluetooth

Legge la temperatura del corpo (auricolare e frontale), dell'ambiente e degli oggetti. Clinicamente accurato, per uso professionale e domestico.

- Schermo LED retroilluminato a 4 colori
- 10 gruppi di memoria
- Commutabile tra °C e °F
- Allarme febbre, acustico e visivo



I-TECH
Life

Collegabile all'APP



Raccomandato dai medici.

CE 0123

DIAGNOSTICA I-Tech Medical Division

Saturimetro FOX-300

- Display OLED a 2 colori
- Indicazione SpO2, battito cardiaco, barra delle pulsazioni, indice di perfusione, pletismogramma
- Autospegnimento quando il dito non è inserito
- Si adatta alle dimensioni del dito di adulti e bambini (no neonati)



CE 0123

Termometro digitale a infrarossi FI06

- Display LCD retroilluminato a 3 colori
- Indicatore di allarme febbre
- Lettura istantanea
- Misurazione frontale in gradi °C/°F
- Memoria disponibile



CE 0197



Detrai il tuo dispositivo

Quando acquisti un dispositivo medico I-Tech Medical Division, hai diritto a una **detrazione di imposta del 19%** sulla spesa sostenuta, al momento della dichiarazione dei redditi.

Il diritto a tale detrazione è legato alla certificazione dei nostri dispositivi e non richiede alcuna prescrizione medica o status particolare dell'acquirente.

Come ottenere la detrazione?

Al momento della dichiarazione dei redditi, ti basterà presentare la fattura d'acquisto (scontrino) fornita dal punto vendita, insieme alla dichiarazione di conformità CE del dispositivo, che puoi scaricare all'interno delle pagine prodotto nel nostro sito web www.itechmedicaldivision.com

PRODOTTI PROFESSIONALI

I-Tech Medical Division anche nel tuo studio!
Scopri i nostri dispositivi ad uso ambulatoriale
per professionisti della salute.

Diatermia

La diatermia, più conosciuta come Tecar terapia (acronimo di Trasferimento Energetico Capacitivo e Resistivo), si posiziona come una delle tecniche terapeutiche più potenti che attualmente esistono nel mercato.

La diatermia, infatti, trasferisce al corpo umano la più grande quantità di energia per unità di tempo.

Generando calore direttamente all'interno dei tessuti, accelera i processi metabolici e quelli di recupero.

Ciò permette di ottenere risultati eccellenti in poco tempo, nel trattamento di patologie sia acute, sia croniche. Un gran beneficio tanto per il paziente, quanto per il fisioterapista.

[Scopri a pagina 48](#)



Ultrasuonoterapia professionale

Gli ultrasuoni sono ideali per il trattamento di patologie a livello muscolare e nervoso, per il recupero di traumi, in caso di patologie sia croniche che acute.

Sono indicati anche per applicazioni in ambito estetico, la rigenerazione dei tessuti, la vascolarizzazione e il drenaggio linfatico.

E se un dispositivo a ultrasuoni avesse anche un modulo dedicato all'elettroterapia?

[Scopri i nostri prodotti ad uso ambulatoriale a pagina 50](#)

REATHERM

La diatermia con effetto di neuromodulazione: efficace, sicura, precisa. Risultati ottimali già dalla prima seduta. Che si tratti di riabilitazione, sport, estetica.



PROGRAMMI

REHAB

01 Arto fantasma	11 Disfunzioni ATM	21 LCA
02 Artrosi ginocchio	12 Distorsione	22 Linfedema
03 Artrosinovite	13 Distrazione muscolare	23 Lombalgia
04 Borsite	14 Dolori articolari	24 Lombosciatalgia
05 Cervicalgia	15 Edema	25 Meniscopatia (sinovite meniscale)
06 Colpo frusta	16 Entesite	26 Piede diabetico
07 Condropatia	17 Epicondilite	27 Sindrome del piriforme
08 Contrattura muscolare	18 Epitrocitea	28 Strappo muscolare
09 Contusione	19 Ernia del disco	29 Tendinite acuta
10 Stiramento muscolare	20 Esiti cicatriziali	30 Tendinite cronica

MODULAZIONE 1 ÷ 100 HZ

Trattamenti confortevoli, anche in atermia, effetto di neuromodulazione. Da non confondere col classico duty-cycle.

401 FREQUENZE (300 ÷ 700 KHZ)

per adattare il trattamento alle esigenze del singolo paziente

10 MEMORIE LIBERE MODALITÀ CUSTOM

trattamento personalizzato, fino a 60 minuti

MANIPOLI MONOPOLARI E BIPOLARI

ergonomici

50 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

per una vera guida ai trattamenti

FORMAZIONE PROFESSIONALE INCLUSA

LEGGERA, POTENTE, TRASPORTABILE

3 kg, 200W

Incluso nella dotazione



Aggiungi Troll-M!

Carrello a 3 ripiani con 4 ruote girevoli e 1 presa di alimentazione.



SPORT

- 31 Tendinopatia cuffia rotatori
- 32 Ulcera
- 33 Versamento
- 34 Artroprotesi (recupero)
- 35 Fratture

BEAUTY

- 01 Cellulite
- 02 Collagene
- 03 Edema
- 04 Massaggio drenante
- 05 Microlifting

- 01 Contrattura muscolare
- 02 Contusione
- 03 Defaticamento muscolare
- 04 Distorsione
- 05 Ematoma
- 06 Lesione tendinea
- 07 Massaggio superficiale
- 08 Massaggio profondo
- 09 Stiramento muscolare
- 10 Strappo muscolare

+ 10 MEMORIE LIBERE

I-TECH UT2

Doppio manipolo (5 cm² e 1 cm²) e possibilità di scelta della frequenza di lavoro (1-3 MHz) per adattare il trattamento alle esigenze terapeutiche del paziente.



Incluso nella dotazione



Aggiungi Troll-M!

Carrello a 3 ripiani con 4 ruote girevoli e 1 presa di alimentazione.



CE 0068

I-TECH UE

Un dispositivo completo. Ultrasuonoterapia, elettroterapia con possibilità di combinare le due terapie per benefici ancora maggiori.



Incluso nella dotazione



Aggiungi Troll-M!

Carrello a 3 ripiani con 4 ruote girevoli e 1 presa di alimentazione.



CE 0068

Non perderti i nostri contenuti: consigli utili per la tua terapia!

Iscriviti alla nostra newsletter.



www.itechmedicaldivision.com/newsletter/



I-TECH
Life

Ottieni il massimo
dalla tua terapia.

**Scarica
la nostra app
e inizia il tuo percorso
terapeutico.**



I-TECH
MEDICAL DIVISION
a **IACER** brand

I.A.C.E.R. Srl

via Enzo Ferrari 2

30037 Scorzè (VE) - Italia

Tel.: (+39) 041/5401356

itechmedicaldivision.com

C.F. e P.Iva: IT00185480274

customercare@iacer.it

